



OptiExpert™ app

Guía para usuario

V4.0.



CooperVision®

Introducción


La app OptiExpert™ de CooperVision ha sido diseñada para hacer la experiencia del paciente aún mejor.

Los grados de la escala de Efron permite la consulta rápida y sencilla de las 16 complicaciones oculares de polo anterior relacionadas con el uso de lentes de contacto, acompañada de textos explicativos, la posibilidad de comparar las condiciones de los pacientes y guardar registros detallados.

La Calculadora de Multifocales hace el proceso de la adaptación a pacientes presbítas más sencillo y eficiente – ayudándole a seleccionar las lentes y ahorrando tiempo en gabinete.


La Calculadora de Tóricas le proporciona una forma eficaz de calcular y evaluar las lentes de prueba tóricas recomendadas para sus pacientes con astigmatismo.

La app para usuario le proporciona información acerca del acceso y uso de las funcionalidades de la app.

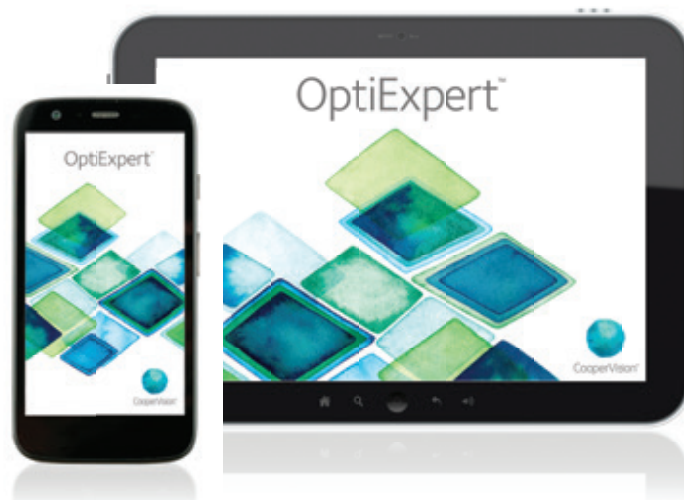

Nota: las imágenes de esta guía para usuario corresponden a la versión para móviles de la app. Para información adicional sobre el uso en tablets, por favor diríjase a la página 34.


OptiExpert™ es una herramienta educativa, referenciada y de información para los profesionales de la salud visual. Los profesionales de la salud visual pueden optar por usar la aplicación en la evaluación de sus pacientes pero no está destinada para tomar una decisión clínica. OptiExpert™ no está destinada ni constituye un consejo médico ni está destinada para reemplazar la evaluación del paciente realizada por un profesional de la salud visual.

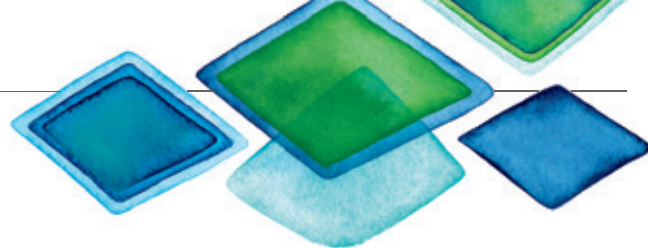

Primero seleccione su país en la lista del desplegable [Seleccione país](#); esto cambiará la selección de los productos disponibles en la aplicación para ajustarse a aquellos que sean relevantes en su país.

Después toque en [Seleccione idioma](#) y seleccione el idioma que prefiera de la lista. Las funcionalidades de la app están disponibles hasta en 14 idiomas (tenga en cuenta que no todas las funcionalidades están traducidas a todos los idiomas). No obstante, las opciones para seleccionar idioma se pueden cambiar de acuerdo a la región que haya elegido.



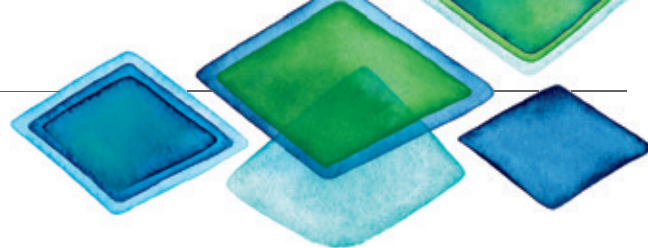


OptiExpert™

Nota legal

OptiExpert™ es una herramienta educativa de referencia e información para profesionales de la visión. Los profesionales del cuidado de la visión pueden optar por utilizar la aplicación en relación con su propia evaluación del paciente, pero no pretende ser sustitutiva en la toma de decisiones clínicas. OptiExpert™ no pretende ser y no constituye un consejo médico o de optometría ni pretende sustituir a la evaluación del paciente realizada por un profesional de la visión.

Si almacena cualquier dato de un paciente u otros datos personales en la aplicación usted es completamente responsable de velar por el uso y la seguridad de los datos siendo suficiente si cumple con toda la protección de datos aplicable y/o leyes de privacidad. Como persona responsable del tratamiento de los datos usted debe revisar las características de seguridad en esta aplicación y asegurarse de que es adecuada para el tratamiento de datos personales, incluyendo los datos de los pacientes. Si lo desea puede cambiar la contraseña en la aplicación como medida de seguridad adicional.

tratamiento de datos personales, incluyendo los datos de los pacientes. Si lo desea puede cambiar la contraseña en la aplicación como medida de seguridad adicional.

Política de privacidad

OptiExpert™ utiliza Google Analytics el cual recopila datos de forma anónima sobre como utiliza usted la aplicación. Los datos de análisis proporciona a CooperVision ideas acerca de cómo se utiliza OptiExpert™, lo cual nos ayuda a ofrecer una mejora continua en la experiencia para el usuario. Mediante el uso de OptiExpert™ usted da su consentimiento. Los datos de usuarios (por ejemplo, registros de pacientes) almacenados en OptiExpert™ no se recogen o son compartidos.

☒ Acepto los términos de uso expuestos


☒ Me gustaría cambiar la contraseña de acceso a OptiExpert

[Continuar](#)

Para [comenzar](#), por favor confirme que está de acuerdo con la nota legal.

También puede elegir la opción de cambiar su contraseña.



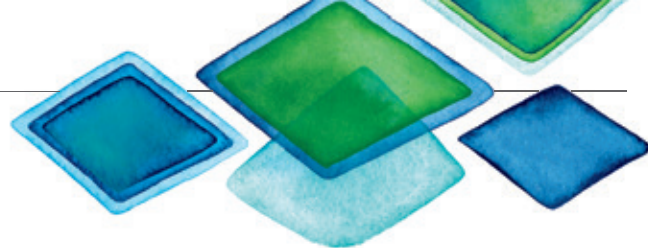


The screenshot shows the OptiExpert app login interface. At the top, the title 'OptiExpert™' is displayed. Below it, there is a checkbox labeled 'Recordar la contraseña' which is checked. Under the heading 'Contraseña:', there are two radio button options: 'Defecto' and 'Personalizado', with 'Personalizado' being selected. Below this, the 'Nueva contraseña' section contains a text input field with the placeholder 'optiexpert' and a radio button labeled 'Custom' which is also selected. The 'Pregunta de seguridad' section features a dropdown menu currently showing 'Su destino de vacaciones favorito'. Below that, the 'Respuesta:' section has a text input field containing the word 'Playa'. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Usar'.

Si desea que la app recuerde su contraseña, marque esta opción en la casilla indicada.

Para cambiar su contraseña, seleccione la opción Personalizado, escriba su nueva contraseña y rellene la pregunta de seguridad.

Ahora toque en “Usar”.




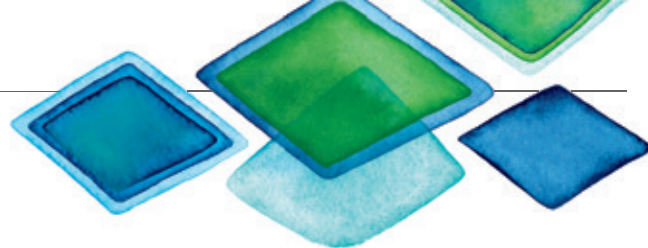

The screenshot shows the login interface of the OptiExpert app. At the top, there is a logo consisting of a blue circle with a white dot inside, followed by the text "CooperVision" in a small font and "OptiExpert™" in a larger font. Below the logo, the word "ACCEDER" is displayed in a bold, black, sans-serif font. Underneath, the label "Contraseña" is followed by a password input field containing ten black dots. Below the input field, there is a checkbox with a checkmark inside, followed by the text "Recordar la contraseña". To the right of these elements is a blue button with the word "ACCEDER" in white. At the bottom of the form, there is a link that says "¿Olvidó su contraseña?".

Introduzca la contraseña cuando se le solicite. Si ha elegido usar la contraseña asignada por defecto, pero no sabe cuál es, diríjase al área para profesionales de la web de CooperVision para ver más detalles, o contacte con el departamento de atención al cliente de CooperVision.




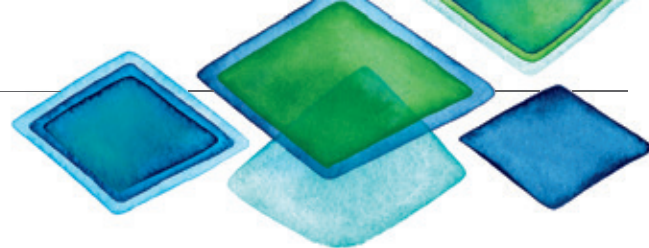

Toque en la funcionalidad que desee usar: Los grados de la escala de Efron, Calculadora de Multifocales o Calculadora de Tóricas.





Los grados de la escala de Efron

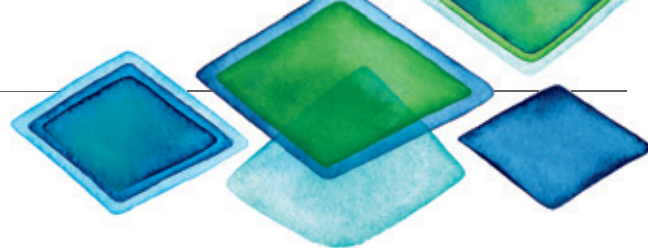




Para consultar Los grados de la escala de Efron, toque en el botón de arriba.



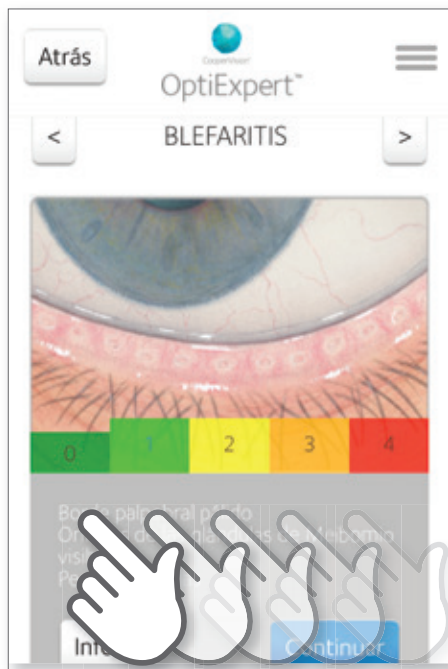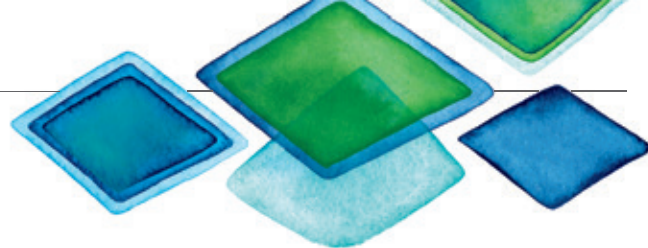


Toque en los números de 0 a 4 para cambiar el Grado de la complicación. La información del resumen se actualizará. Puede cambiar entre las 16 complicaciones tocando en las flechas.

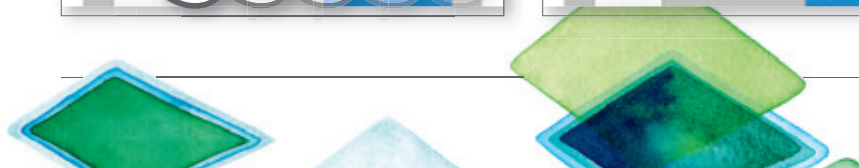

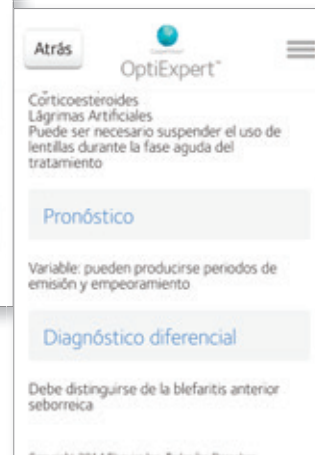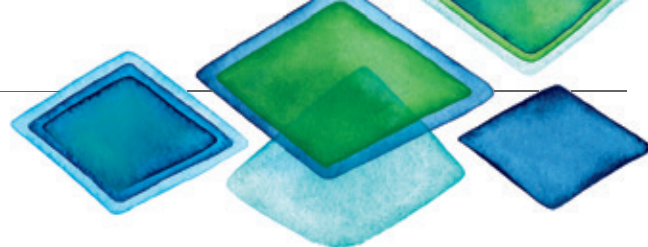

Tocar en [Info](#) le proporciona más información sobre la complicación.



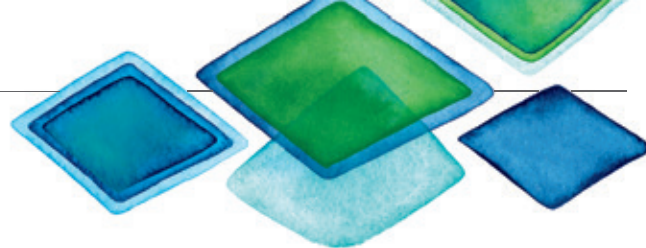

Atrás

OptiExpert™

< BLEFARITIS >

0 1 2 3 4

Borde palpebral
Orificios de las glándulas de Meibomio
Pestañas limpias

Info Continuar

Atrás

OptiExpert™

Seleccione un paciente ?

Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento

Limpiar OK


Añadir a un nuevo paciente




Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento



Tocar en [Continuar](#) le permitirá avanzar para guardar el registro de un paciente. Busque en la base de datos un paciente ya existente o cree un paciente nuevo según lo que necesite.

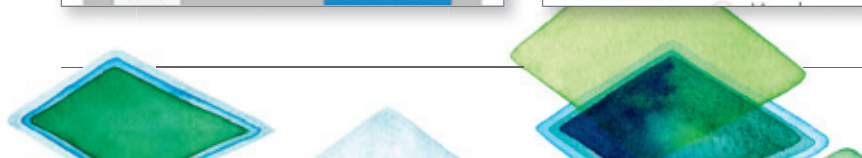

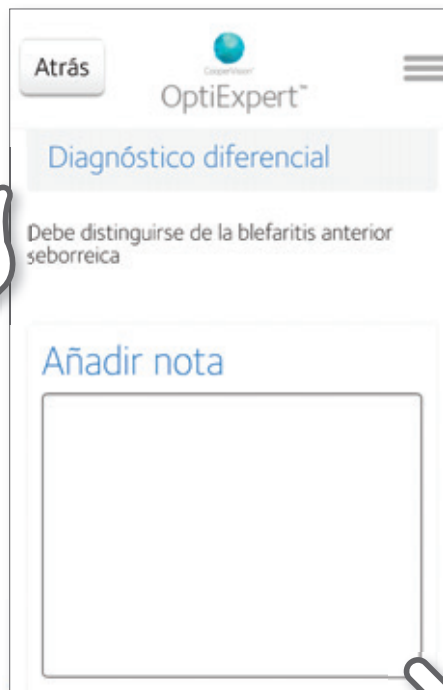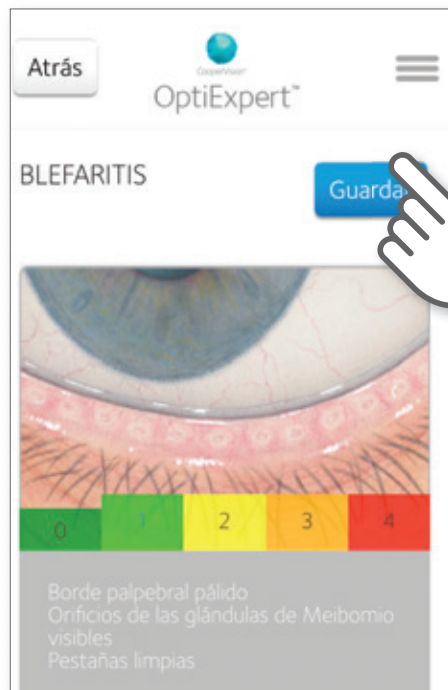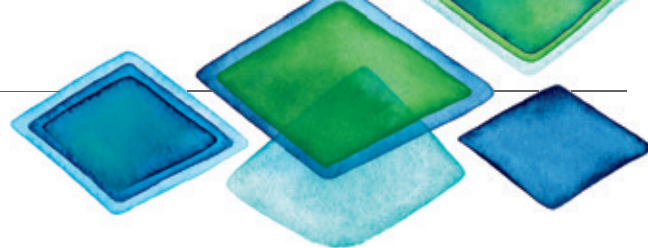


El registro de un paciente puede ser guardado tocando en el botón “Guardar” en la parte superior de la pantalla. Opcionalmente, deslice hacia abajo para introducir comentarios adicionales antes de guardar.



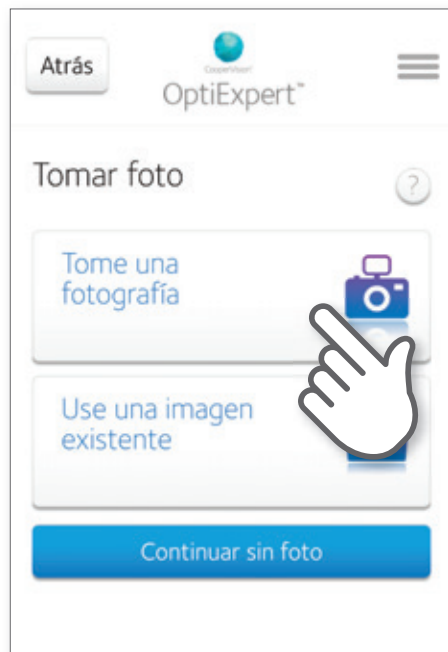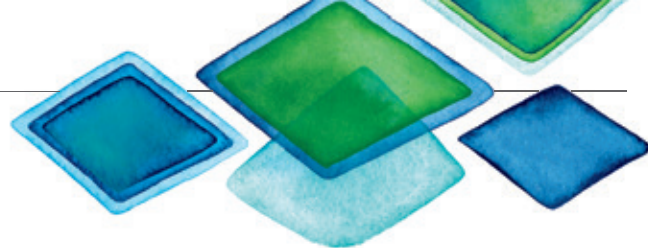


Para comparar la condición del ojo del paciente con Los grados de la escala de Efron, toque en el botón del centro.



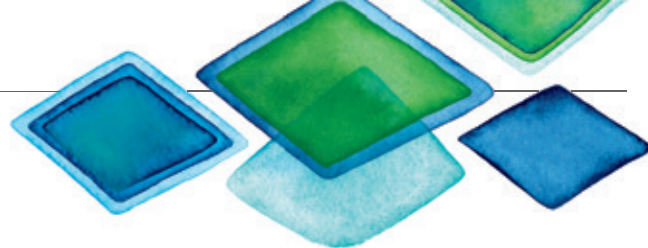



Tome una imagen del ojo del paciente usando la cámara del dispositivo, toque en [Tomar foto](#). Opcionalmente, para usar una imagen ya existente en la galería del dispositivo (por ejemplo una fotografía de la lámpara de hendidura que ha sincronizado con su dispositivo), toque en [Use una imagen existente](#).



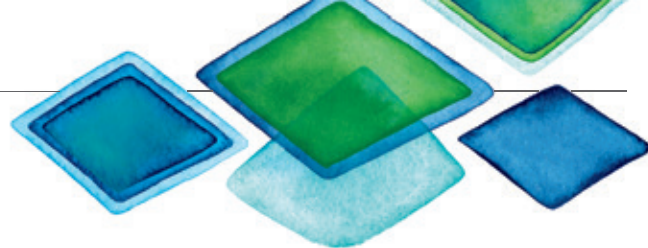


Use el gesto del pellizco con dos dedos para acercar/alejar y girar la fotografía seleccionada hasta obtener la imagen deseada. Toque en el botón [Girar](#) para rotar la imagen 90 grados. Toque en [Continuar](#) cuando tenga la imagen deseada.



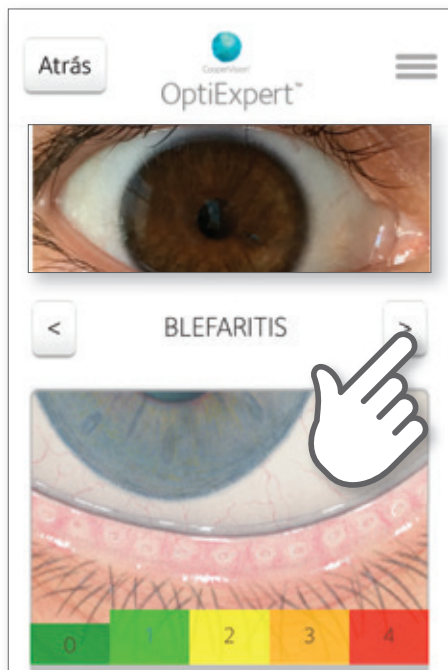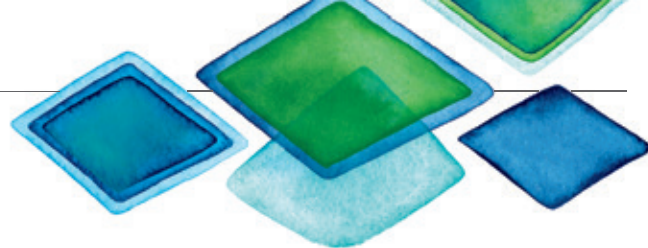


Cambie las complicaciones de Efron usando las flechas y cambie el Grado usando los botones del 0 al 4 hasta que ambas imágenes coincidan. Como se vio en las páginas 6 y 7, toque en Info para más [información](#) sobre una complicación o toque [Continuar](#) para guardar el registro de un paciente.



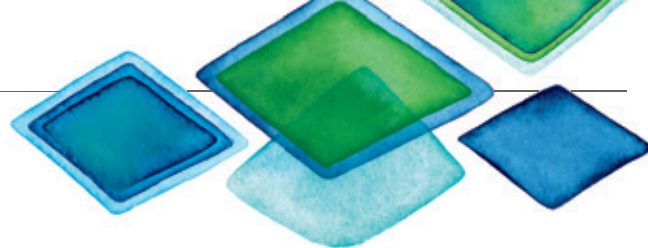




Para buscar el registro de un paciente ya existente, toque en el botón de abajo.

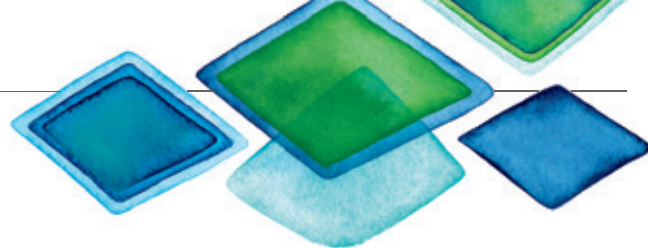



[Atrás](#)

Seleccione un paciente



Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento


p p, 05-06-1980, male

p t, 05-06-1980, male

P p, 12-08-1986, male

Búsqueda de un paciente. Una vez que un paciente es seleccionado, elija un registro de los que aparecen en la pantalla. Desde aquí usted puede editar o borrar un registro, o eliminar el perfil completo del paciente.



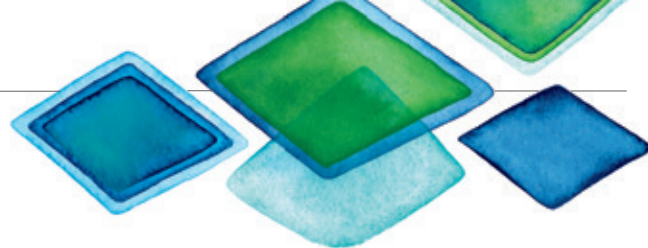


Additional instructions

Se puede guardar un máximo de 4 registros por cada paciente. Si intenta guardar un quinto registro, se le pedirá confirmación, y el registro más antiguo del paciente será eliminado.




Calculadora Multifocales

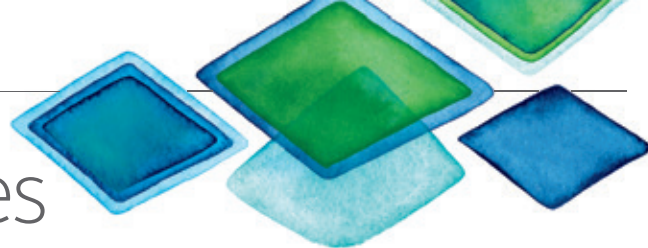


Para usar la Calculadora de Multifocales, toque en el icono adecuado en la pantalla inicial.



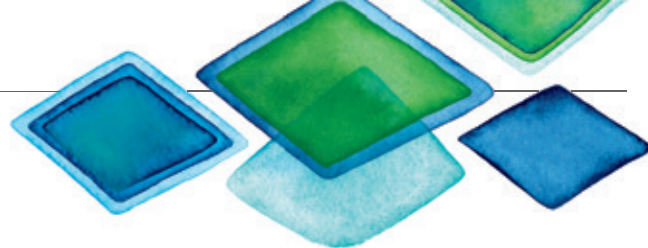

Atrás


OptiExpert™

☰

Introduzca la graduación de gafas

?

Ojo Derecho

Ojo Izquierdo

Sphere ▼

Sphere ▼

Cyl ▼

Cyl ▼

Ojo Dominante

☐ Derecho

☐ Izquierdo


?

Add ▼

Todos los cálculos están basados en una distancia al vértice de 11 mm.


Introduzca la graduación de gafas más actual del paciente, seleccione el ojo dominante y toque en [Calcular](#).



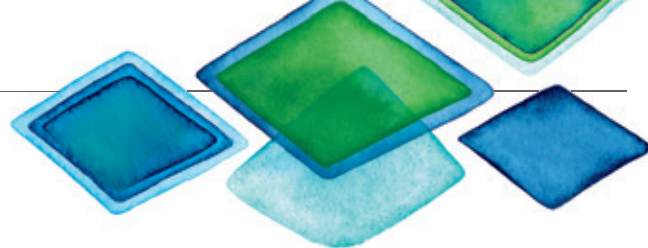

Toque en el reemplazo que desea adaptar. (La elección del reemplazo dependerá de la graduación de gafas introducida.)



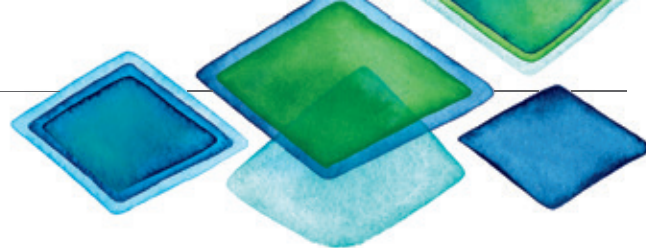


Toque en el producto que desea adaptar. (La elección del producto dependerá de la graduación de gafas introducida.)

El campo de la lente de contacto seleccionada se expandirá para mostrar los parámetros recomendados para maximizar el éxito de la adaptación.




Calculadora Tóricas

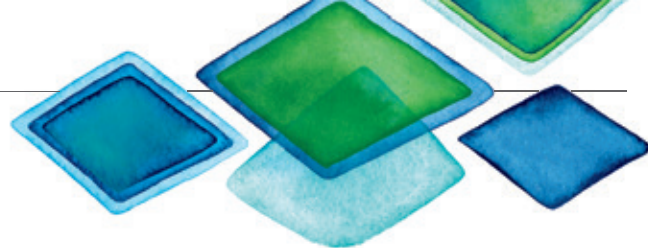

Para usar la Calculadora de Tóricas, toque en el icono adecuado en la pantalla inicial.




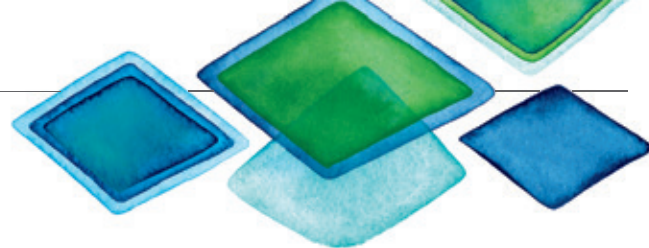

Seleccione la función deseada.



New Calculation

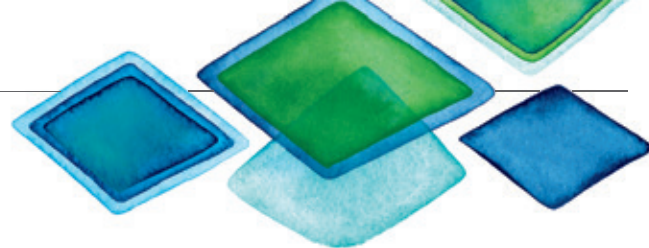

Atrás

OptiExpert™

Introduzca la graduación de gafas

Escoja el ojo

☐ Derecho ☐ Izquierdo

Sphere

Cyl

Axis

Back Vertex

Atrás

OptiExpert™

Escoja el ojo

☐ Derecho ☐ Izquierdo

Sphere

Cyl


Axis

Back Vertex

Calcular


Selecncione el ojo, introduzca la graduación de gafas más actual del paciente, introduzca la distancia al vértice, toque en [Calcular](#).



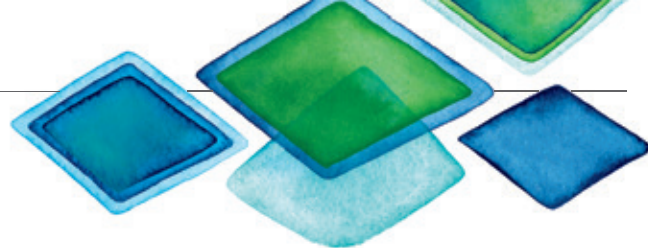



Toque en el reemplazo que desea adaptar. (La elección del reemplazo dependerá de la graduación de gafas introducida.)



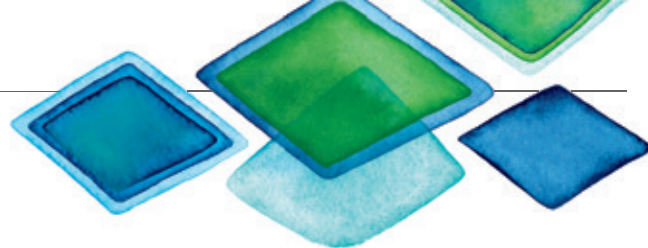

Toque en el producto que desea adaptar. (La elección del producto dependerá de la graduación de gafas introducida.)




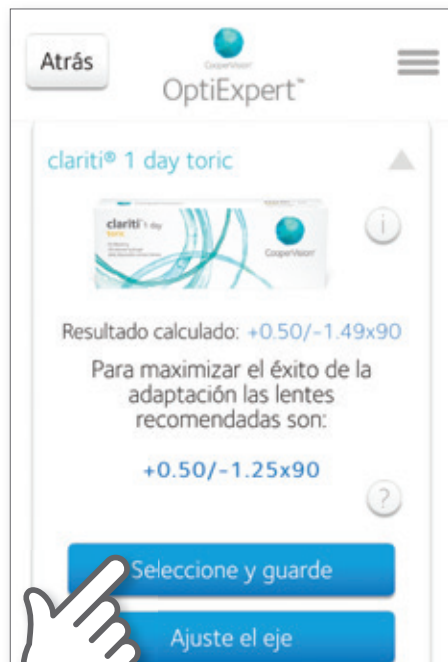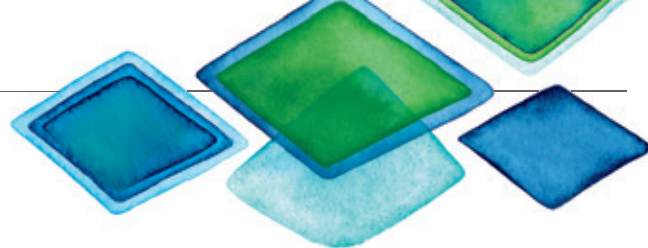


El campo de la lente de contacto seleccionada se expandirá para mostrar los parámetros recomendados para maximizar el éxito de la adaptación.


Toque en **Seleccionar y guardar** para guardar la prescripción de la lente de contacto en el registro de un paciente. Esto puede hacerse antes o después del ajuste de la lente.



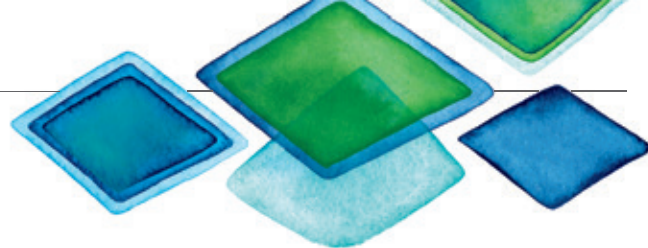



Para ajustar el eje de la lente de contacto toque en [Ajustar el eje](#), después toque en los botones $+$ o $-$ hasta conseguir el giro deseado. Mantenga pulsado cualquiera de los dos botones para acelerar el ajuste. La graduación de la lente de contacto se actualizará automáticamente.

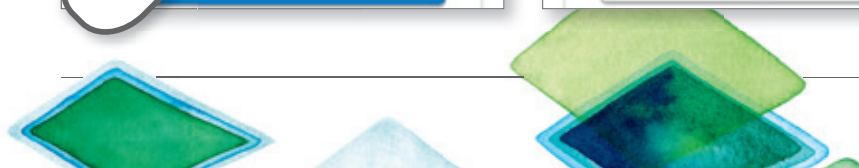

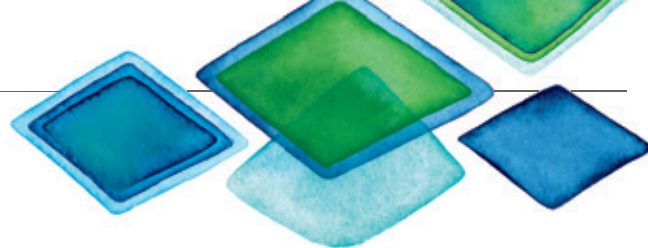

Para ajustar la potencia esférica, toque en [Ajustar la potencia esférica](#), después toque en los botones $+$ o $-$ hasta conseguir la potencia esférica deseada. La graduación de la lente de contacto se actualizará automáticamente.

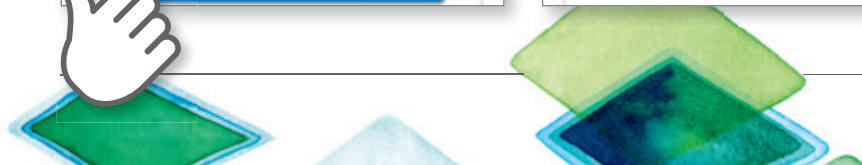

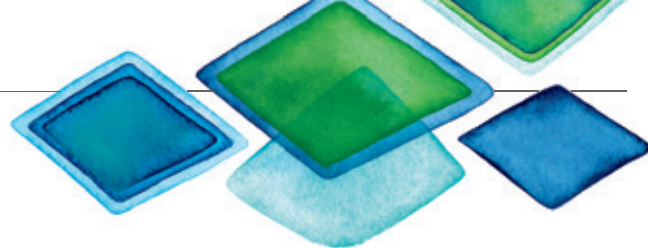

Afinar el cálculo existente

The screenshot shows the OptiExpert app interface. At the top, there is a back button labeled 'Atrás', the app logo 'OptiExpert™', and a menu icon. Below this, the section 'Seleccione un paciente' is highlighted with a blue header and a question mark icon. It contains three input fields for 'Nombre', 'Apellidos', and 'Fecha nacimiento', followed by 'Limpiar' and 'OK' buttons. Below this section, there is another section titled 'Añadir a un nuevo paciente' with input fields for 'Nombre', 'Apellidos', and 'Fecha'.


Buscar y seleccionar un paciente.

En la pantalla de perfil de paciente puede editar o eliminar un registro, o eliminar el perfil completo del paciente.

Para ajustar un cálculo ya existente, toque en el registro para seleccionarlo y proceda a ajustar el eje y/o la potencia esférica según las instrucciones anteriores.



Ajustes

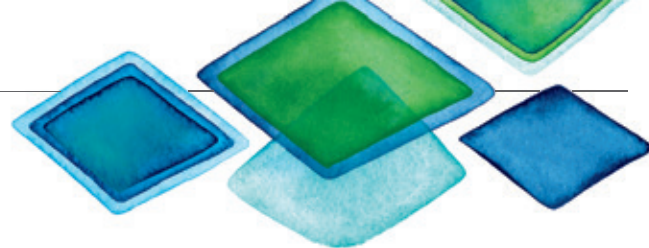

Para abriri el menú de ajustes, toque en el icono redondo en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione Ajustes de usuario.

Aquí puede volver a leer la nota legal, cambiar sus ajustes de usuario, país o idioma.



Uso para Tablets

Esta guía muestra capturas de pantalla de la versión para móviles. Las funcionalidades siguen siendo las mismas en una tablet, pero los diseños de las pantallas están optimizados para un mejor uso del espacio disponible. La orientación de la app está bloqueada.

Si aparece al revés, simplemente gire el dispositivo 180°. Una vez pasada la pantalla de inicio en una tablet, las opciones están reemplazadas por una ventana que aparece y se oculta la cual se activa tocando en el botón del [menu](#).

